

La solution d'alimentation idéale pour les mères qui allaitent au sein ?

L'allaitement maternel est une des choses les plus naturelles qu'une mère puisse faire pour son bébé.

Depuis plus de 30 ans Medela travaille avec des scientifiques de l'université d'Australie occidentale (University of Western Australia).

De récentes études ont permis d'étudier le schéma de succion du nourrisson au sein. On a découvert que l'aspiration joue un rôle clé dans la capacité de bébé à téter efficacement, mais aussi que la position du mamelon dans la bouche est importante. Contrairement à ce que l'on pensait, le mamelon n'atteint pas la jonction des palais dur et mou, et c'est grâce à la combinaison du mouvement de la langue et des mâchoires que bébé développe un comportement d'alimentation unique. Cette technique individuelle de succion permet à bébé d'aspirer, déglutir, respirer, ce qui maintient son oxygénation.

Sur la base de ces recherches un produit novateur pour l'allaitement a été développé avec lequel le bébé se comporte de la même façon - scientifiquement prouvé - qu'il a appris lors de l'allaitement maternel.



✓ Pourquoi Calma ?

Avec une tétine conventionnelle, bébé doit changer son comportement d'alimentation naturellement appris au sein. Même si bébé ne suce pas activement la tétine, le lait s'écoule librement et le bébé doit arrêter l'écoulement de lait pour pouvoir faire une pause puis respirer.

Ce changement total de succion explique pourquoi les bébés rencontrent des difficultés, premièrement pour accepter une tétine conventionnelle, et deuxièmement pour retourner au sein. Pour éviter cela, Medela a conçu une toute nouvelle solution d'alimentation pour le lait maternel: Calma

Avec Calma, le lait s'écoule uniquement quand le bébé le déclenche lui-même. Avec Calma, le bébé peut donc conserver le même comportement alimentaire qu'il a appris lors de l'allaitement maternel. Calma arrive exactement au point juste dans la bouche du bébé. Avec la croissance du bébé son comportement alimentaire change. Calma soutient se développement et répondra toujours à ses besoins. La combinaison optimale de sucer, avaler et respirer lui permet de se nourrir plus doucement, et à rester calme et détendu pendant et après la tétée. Pour que le lait sorte le bébé doit exercer une certaine force d'aspiration.



Calma - embout seul

! solution d'alimentation pour lait maternel - incluant un capuchon de protection et un couvercle multifonctions

Calma avec biberon 150 ml

! incluant un capuchon de protection et deux couvercles multifonctions




Avec Calma :

- | Maman utilise une seule solution d'alimentation (pas besoin de tailles ou de vitesses différentes)
- | Bébé s'alimente en faisant des pauses et en respirant régulièrement
- | Le lait ne s'écoule pas tant que bébé n'aspire pas
- | L'écoulement de lait est stoppé quand bébé fait une pause et respire
- | Bébé garde son rythme naturel de succion ce qui lui permet de revenir plus facilement au sein

LE LAIT S'ÉCOULE



- | Langue en bas
- | Vide maximum

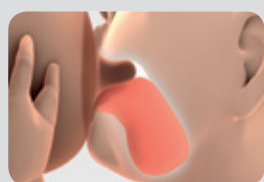

Sein

PAS D'ÉCOULEMENT

- | Langue en haut
- | Vide minimum

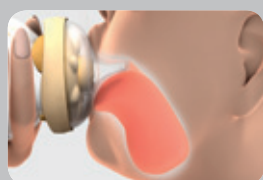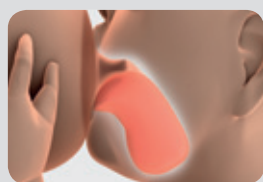


Calma

Nettoyage et hygiène

- | Pour des raisons d'hygiène, nous recommandons un changement de la tétine au bout de 3 mois.
- | Nettoyer chaque pièce immédiatement après utilisation pour éviter que des résidus de lait ne sèchent et pour empêcher la prolifération de bactéries.
- | Démonter, laver à l'eau savonnée tiède et rincer à l'eau claire les 3 pièces.
- | Ensuite faire bouillir Calma pour 5 minutes dans de l'eau ou le stériliser avec de la vapeur dans les Sachets pour micro-ondes Quick Clean Medela.
- | Ne pas toucher l'intérieur des pièces, afin d'éviter toute contamination.
(Pour des instructions détaillées, voir le mode d'emploi)

www.ready-4-calma.com

Avantages techniques de Calma

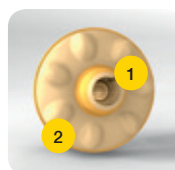

Orifice d'écoulement du lait

- 1 Le débit de lait est régulé par l'interaction entre l'aspiration de bébé et le système de contrôle d'écoulement du lait.

Les stabilisateurs

- 2 Les petites bosses empêchent l'embout en silicone de s'affaisser et le rendent plus stable.



Système de ventilation

- 3 Le biberon pour lait maternel est ventilé via le système de ventilation ; La force de vissage n'a aucun effet sur l'écoulement du lait.



Couvercle multifonctions

- 4 Ferme le biberon hermétiquement et empêche ainsi les débordements.



Calma

- 5 Reste propre pendant le transport.

Capuchon de protection

- 6 Protège l'embout de Calma.

Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à :

Medela AG, Medical Technology

Lättichstrasse 4b

6341 Baar / Suisse

Téléphone +41 (0)848 633 352 / Fax +41 (0)41 769 51 00

contact@medela.ch / www.medela.ch